

ResMed

AirSense™ 10

AUTOSET


Μια νέα αρχή στις επιλογές θεραπείας

Μια νέα εποχή στη θεραπεία του ύπνου. Το AirSense 10 AutoSet, που διαθέτει άψογα ενσωματωμένο και συνδεδεμένο σύστημα φροντίδας, θέτει καινούργιες βάσεις στη θεραπεία του ύπνου. Με νέο κομψό σχεδιασμό και πολλά νέα χαρακτηριστικά άνεσης, το AirSense 10 AutoSet προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο θεραπείας αυτόματης θετικής πίεσης αεραγωγών (automatic positive airway pressure - APAP) στους ασθενείς σας που υποφέρουν από αποφρακτική άπνοια ύπνου.



Σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών σας

Ο δοκιμασμένος αλγόριθμος AutoSet της ResMed εξελίχθηκε παραπέρα με την προσθήκη του χαρακτηριστικού AutoSet Response που επιτρέπει πρόσθετη προσαρμογή της θεραπείας APAP. Το χαρακτηριστικό AutoSet Response, που υπάρχει ως επιλογή, προσφέρει όλα τα οφέλη του βελτιωμένου αλγόριθμου AutoSet με πιο απαλές αυξήσεις της πίεσης για επιπλέον άνεση καθώς και τα οφέλη του δοκιμασμένου αλγόριθμου AutoSet, συμπεριλαμβάνοντας βελτιωμένη ευαισθησία στον περιορισμό ροής και στην ανίχνευση της κεντρικής άπνοιας ύπνου (Central sleep apnoea - CSA).

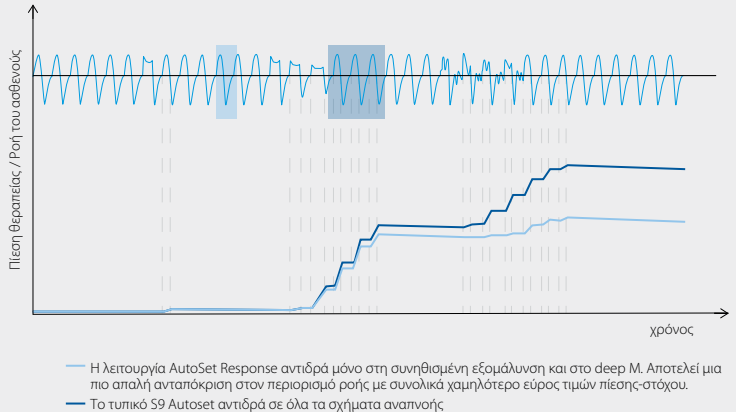

Βασικά χαρακτηριστικά

Προηγμένη φροντίδα για τους ασθενείς

- Χάρη στην ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία AirSense, το AirView™ παρέχει άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των ασθενών σας, συμπεριλαμβάνοντας τις ώρες χρήσης και τα δεδομένα προφίλ στη διάρκεια της νύχτας — τα πάντα άμεσα διαθέσιμα στα χέρια σας.
- Το Remote Assist παρέχει τη δυνατότητα πρωτόγνωρης ασύρματης πρόσβασης σε ρυθμίσεις της συσκευής για την επίλυση οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων απομακρυσμένα. Έτσι, πολλές συνηθισμένες ερωτήσεις για τη θεραπεία μπορούν να απαντηθούν και να επιλυθούν εντός λεπτών.

Βέλτιστη άνεση

- Το νέο χαρακτηριστικό AutoSet Response επιτρέπει πρόσθετη προσαρμογή για ακόμη μεγαλύτερη άνεση.
- Το νέο χαρακτηριστικό AutoRamp με δυνατότητα ανίχνευσης της επέλευσης του ύπνου, έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει τη θεραπεία όσο το δυνατό πιο άνετη από την πρώτη στιγμή.
- Ο νέος υγραντήρας HumidAir™ με τεχνολογία ClimateControl διασφαλίζει σταθερή ύγρανση του αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
- Το AirSense 10 AutoSet διαθέτει μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη, εύκολη στη χρήση, με έξυπνο μενού που παρέχει στους ασθενείς τη δυνατότητα γρήγορης πλοήγησης.
- Το εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ Easy-Breathe™ παρέχει μια φυσική και άνετη κυματομορφή αναπνοής.

Σαφής επίγνωση της θεραπείας

- Η ανίχνευση της περιοδικής αναπνοής Cheyne-Stokes (Cheyne-Stokes Respiration - CSR) σας βοηθάει να αναγνωρίζετε γρήγορα οποιαδήποτε ένδειξη CSR ώστε να προσφέρετε τη σωστή θεραπεία.
- Τα δεδομένα θεραπειών (δεδομένα υψηλής ανάλυσης 7 ημερών, λεπτομερή δεδομένα 30 ημερών, περιληπτικά δεδομένα 365 ημερών) μπορούν να προβληθούν στη συσκευή, ασύρματα μέσω του AirView™ ή μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μέσω κάρτας SD.
- Παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα ροής υψηλής ανάλυσης της κάθε αναπνοής (breath-by-breath) για τη σαφή παρακολούθηση της θεραπείας μέσω της νέας έκδοσης του λογισμικού ResScan™.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος τιμών πίεσης λειτουργίας	4 έως 20 cm H ₂ O
Στάθμη ηχητικής πίεσης	27 dBA με αβεβαιότητα 2 dBA όπως μετρήθηκε κατά ISO 17510-1:2009 (λειτουργία CPAP)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	116 mm x 255 mm x 150 mm
Βάρος (με υγραντήρα)	1248 g
Τροφοδοτικό 90W	Εύρος τιμών παροχής ρεύματος 100-240V, 50-60Hz, 57VA (τυπική κατανάλωση ισχύος), > 108VA (μέγιστη κατανάλωση ισχύος)
Ασύρματη μονάδα	
Τεχνολογία που χρησιμοποιείται	2G GSM
Λειτουργία	
θερμοκρασία	+5°C έως +35°C
υγρασία	10-95%, χωρίς συμπύκνωση
υψόμετρο	Στάθμη της θάλασσας έως 2.591 m
Φύλαξη και μεταφορά:	
θερμοκρασία	-20°C έως +60°C
υγρασία	σχετική υγρασία 5 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Κατασκευή περιβλήματος	Βραδύκαυστο θερμοπλαστικό
Συμπληρωματικό οξυγόνο	Συνιστώμενη μέγιστη ροή συμπληρωματικού οξυγόνου: 4L/min
Τυπικό φίλτρο αέρα	1να πολυεστέρα χωρίς ύφανση
Σωλήνωση	Σωλήνωση SlimLine (15 mm), σωλήνωση ClimateLine Air (15 mm), τυπική σωλήνωση (19 mm)
Έξοδος αέρα	Η κωνική έξοδος αέρα 22mm συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ISO 5356-1:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	(ΗΜΣ) προδιαγραφές κατά IEC 60601-1-2: 2007. Για περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας
Χρήση σε αεροπλάνα	Η ResMed επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (Federal Aviation Administration - FAA) (RTCA/DO-160, ενότητα 21, κατηγορία M) σε όλες τις φάσεις του αεροπορικού ταξιδιού
IEC 60601-1: 2006	Κλάση II (διπλή μόνωση), Τύπος BF Προστασία από δειξίωση IP22

Κωδικοί προϊόντων

	EUR1	EUR2	EUR3
AirSense 10 AutoSet	37245	37271	37266
HumidAir	37300	37300	37300
ClimateLineAir™ tubing	37296	37296	37296

EUR1: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Πολωνικά
EUR2: Αγγλικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Εσθονικά, Ρωσικά και Σλοβακικά.
EUR3: Αγγλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Τουρκικά.